



RIDDER

Assistent

★★★★★ PREMIUM



RIDDER GmbH

Ridder Straße 1, D-56379 Singhofen
Tel.: +49 (2604) 9541-0, Fax +49 (2604) 9541-50
Mail: info@ridder-online.de, www.ridder-online.de

Art.-Nr.: A030030107

INDOOR-ROLLATOR

LIEFERUMFANG / DELIVERY CONTENT



1x Indoor Rollator
Indoor walking frame



1x Tablett
tablet





1x Korb
basket



1x Anleitung
instruction manual

ABSTELLEN / PARKING

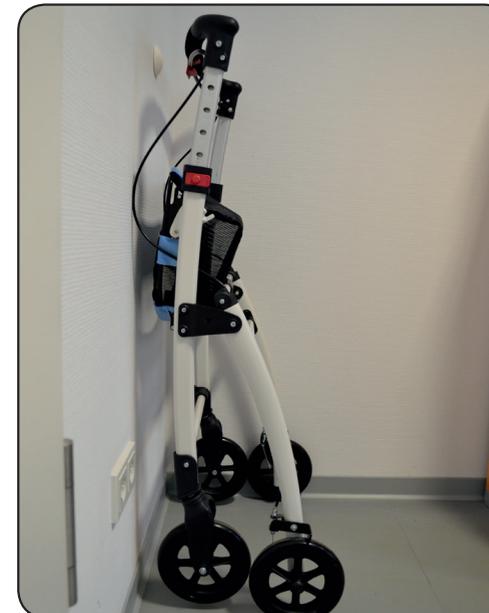

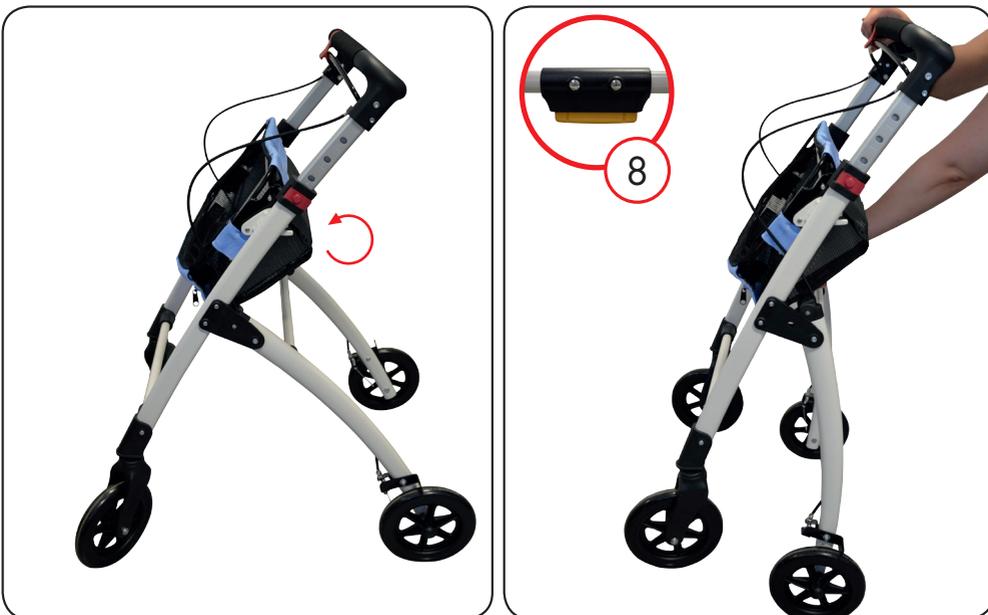

Gebrauchsanleitung Indoor/Wohnraum Rollator A0300301

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch des Rollators.



Instruction Indoor Rollator A0300301

Dear Customer,

Thank you for choosing our product. Please read the safety instructions carefully before use! The manufacturer assumes no liability for improper use of the Rollator /Walking frame.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte montieren oder verwenden Sie den Artikel nicht bevor Sie die Gebrauchsanleitung genau gelesen und verstanden haben. Sollten Sie die Anleitung und Hinweise nicht verstehen, kontaktieren Sie einen Fachmann oder setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung bevor Sie den Artikel anwenden – andernfalls könnte es zu Schäden kommen.

Zur korrekten Einstellung und Benutzung sollten Sie immer Ihren Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen.

- Nur auf ebenem und festem Untergrund verwenden
- Es ist untersagt, sich auf den Rollator zu setzen
- Maximale Belastung: 100 kg
- Maximale Belastung des Tablett: 4,5 kg
- Maximale Belastung des Korbs: 4,5 kg
- Bitte prüfen Sie vor jeder Nutzung und nach Höheneinstellung die Funktion der Bremsen.
- Bitte prüfen Sie, ob die Griffrohre Beidseitig auf gleicher Höhe korrekt eingerastet sind.

Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu persönlichen Schäden führen.

Alle Reifen müssen während dem Gebrauch ständig in festem Kontakt mit dem Boden sein. Dies garantiert die richtige Ausrichtung des Rollators.



mit herausnehmbarem Korb



including removable basket



SAFETY SUMMARY

DO NOT install or use this equipment before reading and understanding of this instruction sheet. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment – otherwise, injury or damage may occur.

Each individual should always consult with her/his physician or therapist to determine the proper adjustment and usage.

- Only use on flat and solid ground
- DO NOT sit on the rollator/walking frame
- maximum strain: 100 kg
- maximum strain of the tablet: 4,5 kg
- maximum strain of the basket: 4,5 kg
- Always check the brakes after every height adjustment in order to avoid a free flex of the cable.
- Always check whether both of the handle tubes are secured at the same height and the snap buttons for the handgrip height adjust are fixed correctly.

Failure to follow these warnings can result in personal injury.

All wheels **HAVE TO** be in contact with the floor at **ALL TIMES** during use. This will ensure the Rollator/Walking frame is properly balanced.

Wichtig: Bitte prüfen Sie alle Teile auf eventuelle Versandbeschädigung. Im Schadensfall den Rollator nicht benutzen und den Händler/Versender kontaktieren.



Stabilitätshinweise

Der Rollator kann bis zu einem individuellen Gewicht von 100 kg Unterstützung gewährleisten, inklusive der Befüllung des Korbs. Der Korb darf mit maximal 4,5 kg befüllt werden.





Important: Check all parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use the product, contact the Dealer/Carrier for further instructions.



stability warnings

The Rollator/Walking frame can provide ambulatory assistance to an individual weighing up to 100 kg, INCLUDING the loading of the basket. The Rollator/Walking frame basket has a weight limitation of 4.5kg

